

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more info.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals, including bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproduction harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



© 2021 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Travel Rollator

Andador de viaje

Déambulateur de voyage

Item # RTL800KD-BK




EU Authorized Representative
Y Sung Handelsvertretung
Duesselthaler Str. 24, 40211
Duesseldorf, Germany

www.drivemedical.com



assembly instructions

1. Remove all contents from packaging.

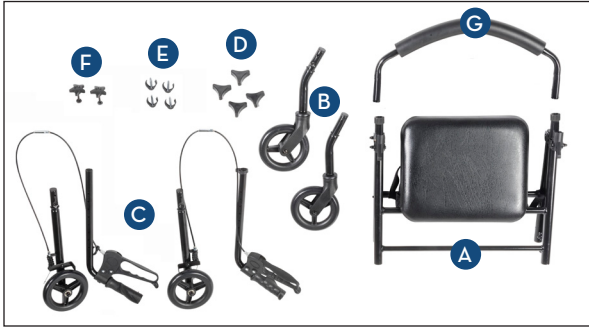

- | | |
|--|---------------------------|
| A. Frame | D. Wheel Tightening Knob |
| B. Front Wheel Assembly (Without Brakes) | E. C-Clip |
| C. Back Wheel Assembly (With Handbrakes) | F. Handle Tightening Knob |
| | G. Backrest |

2. Open frame (A) and place up-side-down on the floor. Insert the front wheel assembly (without brakes) (B) into the front left frame receptacle. Note: Correspond the front wheel assembly labeled "L" with the front frame receptacle labeled "L". Secure in place using the wheel tightening knob (D), threading the knob in from the outside. Insert c-clip (E) above the knob to secure wheel in place. Repeat for second leg, corresponding the front wheel assembly labeled "R" with the front frame receptacle labeled "R".



assembly instructions

3. Attach back wheel assembly (with handbrakes) (C) using the same process as described in Step 2 making sure the wheels are positioned on the outside of the rollator.



4. Position rollator upright and insert the left handle tube into frame and set to desired height. Secure in place using the handle tightening knob (F), threading the knob in from the outside. Note: Ensure the washer is threaded on the inside of the frame closest to the screw head. Repeat for the right handle, making sure both handles are set to the same height. Affix brake cable to the frame using the "S" shaped clamp provided.



5. Attach padded backrest (G) by depressing the black thumb buttons and sliding into the black bracket. Note that back rest can be folded up when not in use.





WEIGHT CAPACITY 350 LBS (158 KG)

safety precautions

1. Please make sure the Rollator is fully opened, seat is down and the folding bar under seat is locked in the down position.
2. Be sure that both knobs are fully tightened and are at equal heights. Test Rollator for stability before applying full weight to hand grips.
3. Test the loop locks before operating the Rollator. When wheels are locked (see illustrations for locking and releasing locks below), lock bar on rear wheels should prevent wheels from rolling. If the wheels roll while brakes are locked, please take unit back to dealer for adjustment. When locks are released, the wheels should roll freely.
4. Always lock loop locks before sitting and do not use seat when unit is on an incline or uneven ground.
5. Replace tires when significantly worn or damaged.

Important Safety Notice

Do not have anyone push you while you are seated on the Rollator. This is a walking aid only and is not to be used as a transportation device.

loop lock operation

Always engage and disengage wheel locks on both sides simultaneously.

1. To Slow Down or Come to a Temporary Stop—Pull up slowly on the loop locks with four fingers until unit slows down or comes to a temporary stop.
2. To Temporarily Lock Wheels in Position—Gently press down on both loop locks with palms until you hear a “click” that will tell you wheels are locked.
3. To Release Wheel Locks—Pull up on both loop locks with palms of hand to original position.



instructions to adjust the hand brake system

Important Safety Notice

The hand brake system fitted on this rollator complies with the manufacturer's quality standards. The hand brake system has been preset (adjusted) to the best performance settings. To better suit you personally, please follow the instructions set out below. You may need to adjust the hand brake systems from time to time as they will wear out with normal use.

Hold firmly in place
do not turn.


To tighten the hand
brake adjustment.
“turn the nut clockwise”

To loosen the hand
brake adjustment.
“turn the nut counter
clockwise”



instrucciones de armado

1. Retire todo el contenido del embalaje.

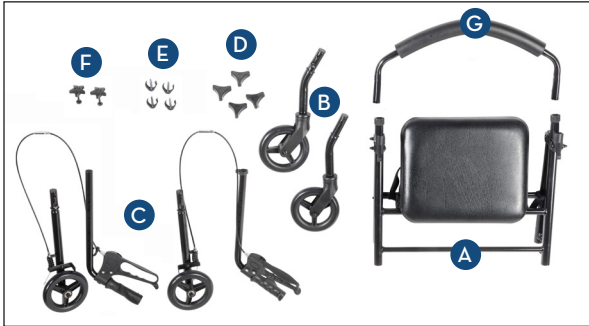

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Cuadro | D. Rueda perilla de apriete |
| B. Rueda delantera montaje (sin frenos) | E. C-Clip |
| C. Ensamblaje de la rueda trasera (con frenos de mano) | F. Perilla de apriete de la manija |
| | G. Respaldo |

2. Abra el marco (A) y colóquelo boca abajo en el suelo. Inserte el conjunto de la rueda delantera (sin frenos) (B) en el receptáculo del marco delantero izquierdo. Nota: Haga corresponder el conjunto de la rueda delantera con la etiqueta "L" con el receptáculo del bastidor delantero con la etiqueta "L". Asegúrelo en su lugar usando la perilla de apriete de la rueda (D), enroscando la perilla desde el exterior. Inserte el c-clip (E) sobre la perilla para asegurar la rueda en su lugar. Repita para el segundo tramo, haciendo corresponder el conjunto de la rueda delantera con la etiqueta "R" con el receptáculo del marco delantero con la etiqueta "R".



instrucciones de armado

3. Conecte el conjunto de la rueda trasera (con frenos de mano) (C) utilizando el mismo proceso que se describe en el Paso 2, asegurándose de que las ruedas estén colocadas en la parte exterior del andador.



4. Coloque el andador en posición vertical e inserte el tubo del mango izquierdo en el marco y ajústelo a la altura deseada. Asegure en su lugar usando la perilla de apriete de la manija (F), enroscando la perilla desde el exterior. Nota: Asegúrese de que la arandela esté enroscada en el interior del marco más cercano a la cabeza del tornillo. Repita para el mango derecho, asegurándose de que ambos mangos estén colocados a la misma altura. Fije el cable del freno al cuadro usando la abrazadera en forma de "S" proporcionada.



5. Fije el respaldo acolchado (G) presionando los botones negros para el pulgar y deslizándolos en el soporte negro. Nota: ese respaldo se puede plegar cuando no está en uso.





CAPACIDAD DE PESO 350 LBS (158 KG)

precauciones de seguridad

1. Por favor asegúrese que el andador Rollator esté completamente abierto, que el asiento esté bajo y que la barra plegable debajo del asiento esté trabada en posición baja.
2. Asegúrese que ambas perillas esté completamente ajustadas y estén a igual altura. Pruebe la estabilidad del andador Rollator antes de apoyar todo el peso en las empuñaduras
3. Pruebe los frenos curvos antes de hacer funcionar el andador Rollator. Cuando las ruedas están trabadas (vea abajo las ilustraciones para bloquear o desbloquear los frenos), la barra de freno de las ruedas traseras deberían prevenir que las ruedas giren. Si las ruedas giran mientras se aplican los frenos, por favor lleve la unidad de regreso a su representante para su ajuste. Cuando los frenos son liberados, las ruedas deben girar libremente.
4. Siempre aplique los frenos curvos antes de sentarse y no use el asiento cuando la unidad esté en un terreno inclinado o irregular.
5. Reemplace las cubiertas cuando estén significativamente gastadas o dañadas.

Nota importante sobre la seguridad

No permita que nadie lo empuje mientras usted está sentado sobre el andador Rollator. Este es sólo una ayuda para caminar y no debe ser usado como aparato de transporte.

operación del freno curvo

Siempre engrane y desengrane los frenos de las ruedas en ambos lados simultáneamente.

1. Para Disminuir la Marcha o Hacer una Detención Temporal—Jale lentamente de los frenos curvos con cuatro dedos hasta que la unidad disminuya la marcha o pare momentáneamente.
2. Para Frenar Momentáneamente las Ruedas en Posición—Presione suavemente ambos cierres de bucle con las palmas hasta que escuche un “clic” que le dirá que las ruedas están bloqueadas.
3. Para Soltar los Frenos de las Ruedas—Empuje hacia arriba sobre ambos frenos curvos a la posición original con las palmas de la mano.



instrucciones para ajustar el sistema de freno de mano

Aviso importante de seguridad

El sistema de freno de mano equipada en este rallator cumple con los estándares de calidad del fabricante. El sistema de freno de mano se ha preestablecido (ajustado) a los mejores valores de rendimiento. Para mejor le conviene personalmente, por favor, siga las instrucciones que se indican a continuación. Es posible que tenga que ajustar los sistemas de frenos de mano de vez en cuando a medida que se desgastan con el uso normal.

Sostenga firmemente en su lugar no encienda.


Para apretar el freno de mano ajuste. “Gire la tuerca en sentido horario”

Para aflojar el ajuste del freno de mano. “Gire la tuerca en sentido horario”



montage

1. Retirez tout le contenu de l'emballage.

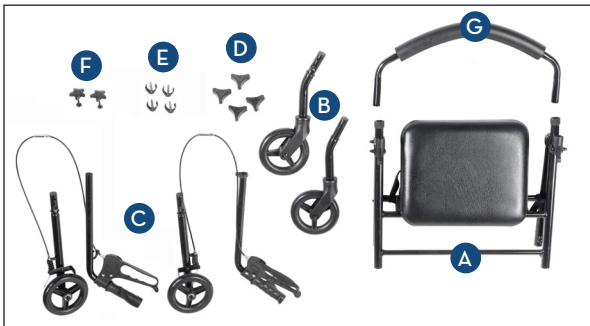

- | | |
|---|------------------------------------|
| A. Cadre | D. Roue bouton de serrage |
| B. Roue avant assemblage (sans freins) | E. C-Clip |
| C. Assemblage de la roue arrière (avec freins à main) | F. Bouton de serrage de la poignée |
| | G. Dossier |

2. Ouvrez le cadre (A) et placez-le à l'envers sur le sol. Insérez l'ensemble de roue avant (sans freins) (B) dans le réceptacle du cadre avant gauche. Remarque: Faites correspondre l'ensemble de roue avant étiqueté «L» avec le réceptacle du cadre avant étiqueté «L». Fixez en place à l'aide du bouton de serrage de la roue (D), en vissant le bouton de l'extérieur. Insérez le c-clip (E) au-dessus du bouton pour fixer la roue en place. Répétez pour la deuxième étape, en faisant correspondre l'ensemble de roue avant étiqueté «R» avec le réceptacle du cadre avant étiqueté «R».



montage

3. Fixez l'ensemble de roue arrière (avec freins à main) (C) en utilisant le même processus que celui décrit à l'étape 2 en vous assurant que les roues sont positionnées à l'extérieur du déambulateur.



4. Positionnez le déambulateur à la verticale et insérez le tube de la poignée gauche dans le cadre et réglez-le à la hauteur désirée. Fixez en place à l'aide du bouton de serrage de la poignée (F), en vissant le bouton de l'extérieur. Remarque: assurez-vous que la rondelle est filetée à l'intérieur du cadre le plus proche de la tête de vis. Répétez pour la poignée droite, en vous assurant que les deux poignées sont réglées à la même hauteur. Fixez le câble de frein au cadre à l'aide du collier en forme de «S» fourni.



5. Fixez le dossier rembourré (G) en appuyant sur les boutons noirs et en le glissant dans le support noir. Remarque: ce dossier peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.





CAPACITÉ DE POIDS DE 350 LBS (158 KG)

précautions d'emploi

1. Assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié, le siège en position ouverte et l'entretoise pliante sous le siège solidement verrouillée en position.
2. Assurez-vous que les deux boutons sont bien serrés et à la même hauteur. Testez d'abord la stabilité du déambulateur avant de mettre votre poids sur les poignées.
3. Testez le verrouillage à boucle avant d'utiliser le déambulateur. Quand les roues sont verrouillées (voir les schémas pour le verrouillage et le déverrouillage), la tige de verrouillage sur les roues arrières devrait empêcher qu'elles ne tournent. Si elles tournent quand même alors que les freins sont verrouillés, rapportez votre article à votre revendeur pour qu'elles soient ajustées. Quand les freins sont relâchés, elles doivent tourner librement.
4. Toujours verrouiller les freins à boucle avant de vous asseoir. Ne jamais vous asseoir si le sol est oblique ou caillouteux.
5. Remplacer les pneus si usés ou défectueux.

Note de sécurité importante

Ne jamais vous laissez pousser par quelqu'un quand vous êtes assis. Votre déambulateur est une aide à la mobilité et ne doit pas servir au transport.

fonctionnement du verrouillage à boucle

Toujours verrouiller et déverrouiller les roues des deux côtés simultanément.

1. Pour ralentir ou s'arrêter - relevez légèrement sur la boucle de verrouillage avec vos quatre doigts jusqu'à ce que le déambulateur ralentisse ou s'arrête complètement.
2. Pour verrouiller les roues temporairement - appuyez doucement sur les deux verrous de boucle avec les paumes jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui vous dira que les roues sont verrouillées.
3. Pour relâcher le verrouillage - relevez les deux boucles de verrouillage en même temps avec la paume de la main pour retourner en position originale.



instructions d'adapter le système de frein à main

Important avis de sécurité

Le système de frein à main monté sur cette rallator conforme aux normes de qualité du fabricant. Le système de frein à main a été réglé (ajusté) pour les meilleurs paramètres de performance. Afin de mieux vous répondre personnellement, s'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous. Vous devrez peut-être ajuster les systèmes de frein à main de temps en temps car ceux-ci avec une utilisation normale.

Tenez-le fermement en place ne s'allume pas.

Pour serrer le frein à main réglage.
"Tourner l'écrou dans le sens horaire"

Pour desserrer le réglage du frein à main.
"Tourner l'écrou contre la gauche"



mantenimiento

Drive recomienda una inspección visual periódica de este producto por parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad , operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2021 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

entretien

Drive recommande une inspection visuelle périodique de ce produit par l'utilisateur afin de s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou desserrés et qu'il n'y a aucune obstruction , fonctionnement sûr. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez www.drivemedical.com/help pour plus d'informations.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2021 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine