

Silla reclinable

Coyote R



ONE

La silla de ruedas Coyote R es reclinable y plegable a un excelente precio. Ofrece un eje de ruedas traseras de extracción rápida, reposabrazos extraíbles y apoyapiernas elevables, abatibles y desmontables.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento, con barra de bloqueo para la reclinación del respaldo. **Figura 1.**

Apoyapiés con elevación desde 50° hasta 0°, ajustables en altura, abatibles, y desmontables para realizar transferencias. **Figura 2.**

Reclinación del respaldo disponible a través del sistema ajustable desde 85° hasta 175°. **Figura 3.**

Ruedas traseras de extracción rápida en ruedas traseras para una mejor forma de transportación, totalmente seguro. **Figura 4.**

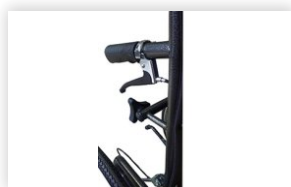


Figura 1

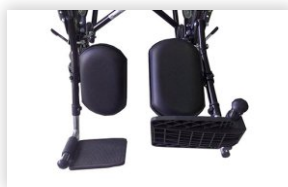


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Estructura del marco	Acero color amartillado
Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad de asiento	16"
Peso del producto	26 kg
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas delanteras	8"x 2"
Ruedas traseras	24" neumáticas extracción rápida
Apoyabrazos	Desmontables
Apoya pies	Elevables, abatibles y desmontables
Altura de respaldo	20" / Con soporte de cabeza 31"
Soporte de cabeza	Incluido



Medidas de envío

A 36"

B 12"

C 38"

Peso 30 kg.

BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda reclinación y posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

