

Cadeira motorizada con inclinação e reclinação elétricas



ONE



Imagem 1

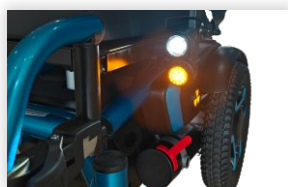


Imagem 2



Imagem 3

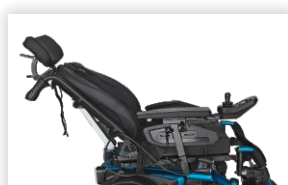


Imagem 4

A Felix® RT é uma cadeira motorizada com estrutura rígida e sistema eletrônico de inclinação e reclinação que oferece máxima independência e conforto. Projetada para usuários com lesão neurológica, permite realizar ajustes posturais sem esforço. Seu encosto e assento de espuma injetada proporcionam suporte contínuo, ajudando a manter uma postura adequada e confortável em todos os momentos.

Controlador dinâmico + luzes + atuador e USB. **Imagem 1.**

Luzes dianteiras e traseiras. **Imagem 2.**

Inclinação eletrônica de 0° a 20°. **Imagem 3.**

Reclinação eletrônica de 90° a 140°. **Imagem 4.**




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Aço azul rígido
Assento	18" x 17"
Altura do encosto	20,5"
Encosto e assento	Tecido acolchoado
Peso do produto	102,4 kg / 226 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	14" x 3" Sólido 9" x 3" Sólido
Motores	2 x 340 W, Freio Eletromagnético
Velocidade	10 kmh
Alcance por carga	45 km
Bateria	24 V, 52 Ah Chumbo-Ácido
Suspensão	Traseiro

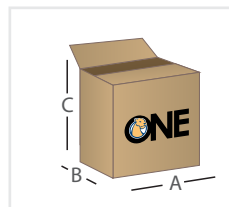

Medidas de envio

A 40"

B 29"

C 34"

Peso 110 kg.

BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

