

# Frontier V6

**magic**  
Mobility



Con tracción central ofrece enormes capacidades todoterreno y para subir bordillos. Sus neumáticos de baja presión brindan una conducción más suave y le dan a la Frontier V6 una mayor capacidad de ascenso. La Frontier V6 es la silla de ruedas ideal para exteriores, pero su tamaño también la convierte en una silla de ruedas capaz de funcionar en interiores.

Con una elevación del asiento de 12", la función de elevación eléctrica C-Me. Viaje a 5 km/h con elevación del asiento de 12". **Figura 1.**

Potentes luces LED instaladas sobre soportes de goma, estas luces son flexibles y resistentes a los golpes. **Figura 2.**

El paquete de ruedas y neumáticos híbrido Frontier V6. **Figura 3.**

Ofrece una amplia gama de opciones y accesorios. **Figura 4.**



Figura 1

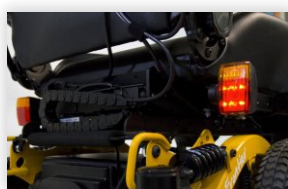


Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	13" hasta 23"
Profundidad asiento	13" hasta 24"
Peso producto	Desde 145 kg
Capacidad peso	154 kg
Altura del respaldo	16.5" hasta 24"
Máximo rango	33 km
Velocidad máxima	8 kmh
Ruedas	8" y 14"
Radio de giro	58 cm ( sin apoyapiés)
Ancho total	27.3" y 28"

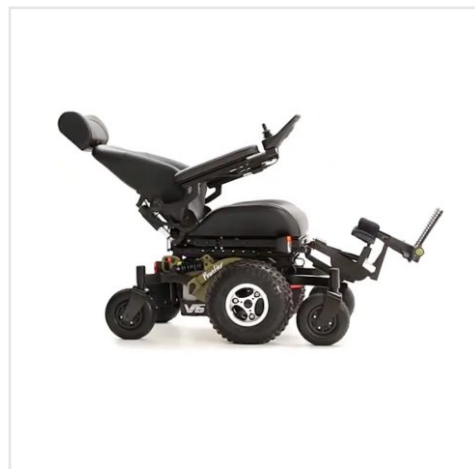

- Elevación e inclinación del asiento 12" / 45°
- Elevación del reposapiernas de 95 a 180°
- Basculación 50°
- Reclinación de 95-160°

## BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

