

QUADTRO SELECT Cushion

ROHO 



The QUADTRO SELECT adapts to your needs and activities. Control the inflation levels across your cushion with the exclusive ISOFLO Memory Control and independent four-compartment design. The interconnected air cells provide immersion and envelopment for pressure redistribution. Available in three different cell heights.

The stretch and antibacterial cover adapts and maintains to any surface or wheelchair. **Image 1.**

The unique air cell design has the ability to adjust and adapt to the shape of the user's body. **Image 2.**

Made of high quality and ultralight polyvinyl in various sizes. **Image 3.**

Water resistant and easy to clean materials. **Image 4.**



Image 1

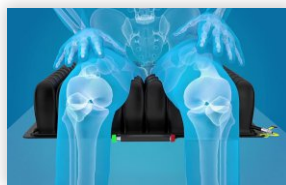


Image 2



Image 3



Image 4



Pensando en ti. Más opciones.

Wheelchair cushions designed to provide the user with support, comfort and protection.

SPECIFICATIONS

Seat width	11" up to 25"
Length	12" up to 23"
Cushion height	High profile 4.25" Medium profile 3.25" Low profile 2.25"
Product weight	1.5 kg / 4 lbs
Weight capacity	158 kg / 350 lbs
Outer cover	Elastic
Air pump	Included (manual)

Single compartment inflation



Inflated in separate compartments

Manual inflation pump



Repair kit

BENEFITS

Designed for users at risk of skin degradation requiring mild stability

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

