

Jay Lite Pro

JAY
Superior Clinical Seating.



Las personas muy activas que se desplazan por sus propios medios necesitan un asiento que se adapte a su ritmo y potencie su propulsión: un apoyo fiable en cada desplazamiento, cada empuje y cada reto. El cojín JAY LitePro satisface esa necesidad con un rendimiento sin concesiones. Gracias a un inserto de elastómero multizona de última generación, el LitePro ofrece alivio de la presión, transpirabilidad y estabilidad en un cojín duradero, de perfil bajo y ultraligero.

Con un peso de tan solo 0,9 kg y un grosor de solo 2 pulgadas, el JAY LitePro es uno de los cojines ajustables para la protección de la piel más ligeros y de menor perfil del mercado. Su diseño delgado se integra en la silla de ruedas sin añadir volumen. **Figura 1**

Con una transferencia de humedad un 45 % superior a la de un cojín de aire tradicional, el cojín JAY LitePro ayuda a mantener la piel más fresca y seca durante todo el día. **Figura 2**

Los módulos de gestión de la presión, integrados e intercambiables, permiten adaptar el nivel de alivio de la presión a las necesidades individuales de cada paciente. **Figura 3**

El inserto de elastómero, permite una inmersión de hasta 1,6", lo que ayuda a redistribuir la presión alejándola de las zonas óseas de alto riesgo y contribuye a mantener una piel más sana y mejor protegida. **Figura 4**



Figura 1



Figura 2



Figura 3

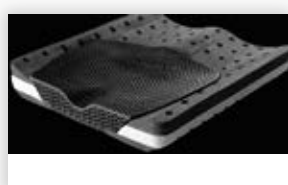


Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Ancho	14" a 20"
Profundidad	14" a 20"
Altura del producto	2"
Peso del producto	Menos de 0.9 kg

Uno de los cojines más ligeros y de menor grosor del mercado



Combina un rendimiento duradero con una limpieza sencilla que requiere poco mantenimiento.

El inserto garantiza una protección constante de la piel, incluso durante los cambios frecuentes



BENEFICIOS

Dirigido principalmente a usuarios activos de silla de ruedas manual ultraligera que se autopropulsan y necesitan un cojín ligero, estable y con alto nivel de protección de la piel

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

